

Appel à la solidarité : Fabrication de masques en tissus dits non sanitaires

<https://www.facebook.com/144978596052153/posts/626341404582534/>

Afin de préserver au mieux notre stock de masques chirurgicaux à l'usage exclusif des soignants, tout en proposant une solution qui pourrait limiter les risques de propagation du virus pour d'autres professionnels qui doivent continuer à travailler (personnel de crèche, personnel administratif, aide à domicile...), nous avons besoin de votre aide pour fabriquer des masques dont le cahier des charges a été conçu par le CHU de Grenoble.

Vous avez une machine à coudre, des chutes de tissus en coton avec performance élevée en filtration (jean, coton épais, molleton d'ancien double rideau, polaire...), des doigts en or 🍷 et un peu de temps devant vous... 😊

Nous avons besoin de vous !

Ci-dessous le protocole pour fabriquer un masque. 

Où déposer vos créations ? (Svp organisez-vous avant afin d'éviter un maximum les déplacements et apporter au moins 10 masques conditionnés dans un sac), tous les jours entre 14h et 17h (sauf le dimanche):

- Pharmacie de la place à Heyrieux
- Nouvelle Pharmacie Normale, 23 Place Miremont à Vienne
- Pharmacie de St-Maurice-l'Exil, 19 rue Jean Perrin

Un grand merci aux pharmacies qui ont accepté de collecter les masques!

On compte sur vous tous! 🙏

⚠️ Pour récapituler, les masques ne protègent pas comme les masques Ffp2 mais ils ont au moins le mérite :

- de ne pas postillonner sur les autres
- de faire une première barrière aux postillons des autres

Et à condition de respecter :

- les gestes barrière : se laver les mains toutes les heures, se laver les mains après avoir enlevé le masque, respecter un espace de 1 mètre, ne pas se serrer la main...
- les consignes de lavage : être lavé et être repassé (ce qui doit être fait avant la première utilisation et entre chaque utilisation) et une fois lavé et sec le laisser sans y toucher à l'air libre avant de le réutiliser 📷

Laissez vos créations de masques en commentaires de ce post pour motiver les couturières et n'hésitez à le partager !

Afin de dispatcher aux personnes qui en auront le plus besoin, merci de me faire passer en message privé vos besoins et justifications.



I. Objet

Dans le cadre d'une situation dégradée et pour pallier à la pénurie de masque de soins, un modèle de création de masque de soins en textile est proposé pour :

- Permettre de se protéger
- Continuer son activité professionnelle
- Permettre le maintien de l'activité de l'établissement et la prise en charge des patients

II. Secteurs et professionnels concernés

Tous les professionnels du CHUGA :

- Des services de soins ne prenant pas en charge de patients Covid-19*
- Des services supports

* les services prenant en charge les patients Covid-19 sont :

- Médecine infectieuse
- Secteurs de réanimation
- Pneumologie
- Les services de médecine interne (3^{ème} A, B et C)



III. Fabrication et entretien du masque de soins textile

Matériel nécessaire pour la réalisation :

- Chutes de coton (environ 20 cm) pour l'extérieur et la doublure
- Molleton fin, polaire fine, ...
- Elastique souple



Le masque de soin est composé de 2 couches de tissus en coton et 1 couche de molleton disposée entre les 2 couches.

Patron en annexe


Entretien du masque :

- Celui-ci est à la charge du professionnel
- Le laver **quotidiennement** à son domicile à 30°C avec du détergent classique

IV. Etapes de fabrication

1- Découper le patron (annexe)
2- Découper les pièces de tissus en coton nécessaire (voir patron) : nous obtenons 4 pièces de tissus
3- Découper le molleton (voir patron) : nous obtenons 2 pièces de molleton
4- Couper environ 2 élastiques de 30 cm pour le grand modèle (adapter la longueur à la taille souhaitée)
5- Assembler les 2 pièces de tissu « extérieur » « endroit contre endroit » partie arrondie
6- Faire le même assemblage pour les 2 pièces tissu doublure
7- Assembler les 2 pièces de tissus obtenues « endroit contre endroit » en insérant les 2 pièces de molleton
Coudre uniquement en haut et en bas : ne pas coudre les petits côtés
8- Retourner l'ensemble sur l'endroit
9- Surpiquer la couture centrale (verticale)
10- Surpiquer le haut et le bas à quelques millimètres du bord
11- Replier les petits côtés (2 fois 1 cm) - repasser
12- Piquer à quelques millimètres du pli pour créer une coulisse
13- Faire glisser le nœud dans la coulisse pour le confort



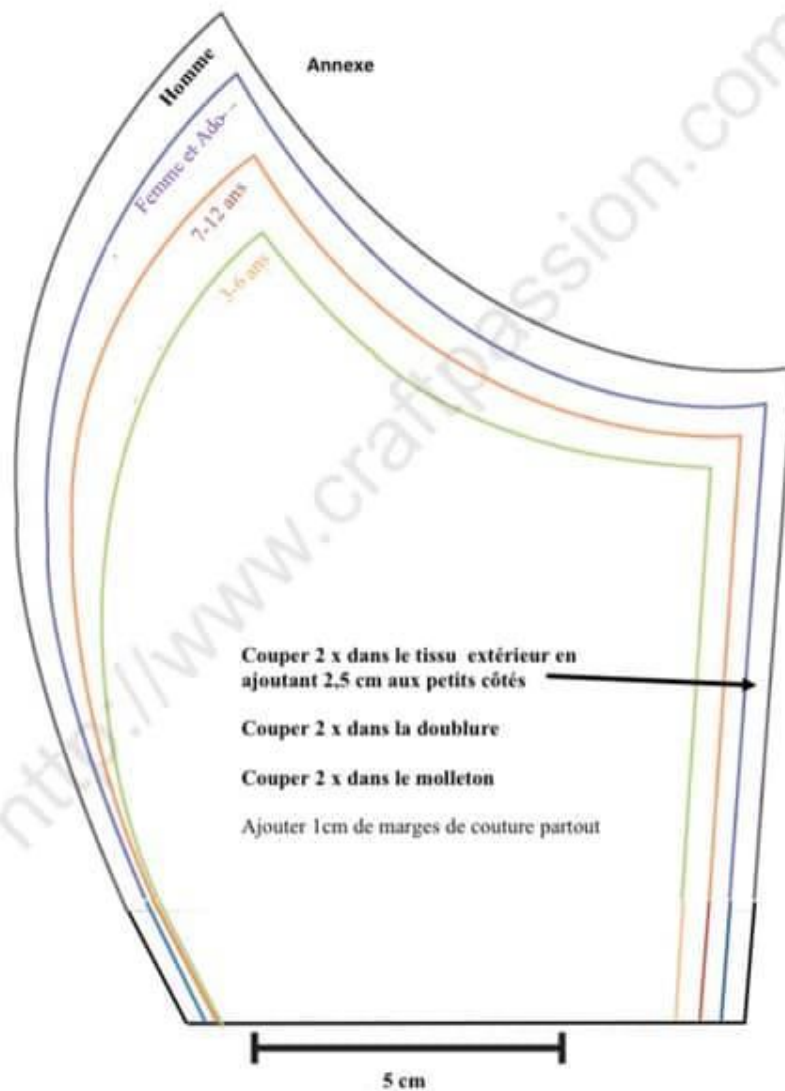

Mesurer ce segment avant de découper le patron